

お使いの入院ケージを 酸素室として活用できる 扉加工サービス


- 01 お使いの入院ケージの扉に、着脱自在のプラスチックカバーを取り付けます。
- 02 気密性を保つテフロン素材のパッキンは、傷んだら交換できます。
- 03 スライド板の開閉で酸素濃度を任意に調整することができます。
- 04 酸素濃度計ホルダーを取り付けることができます。



酸素濃度調整穴
スライド板の移動で 8 つの穴を開閉できます。穴から輸液チューブやネブライザーを通せます。



温度計

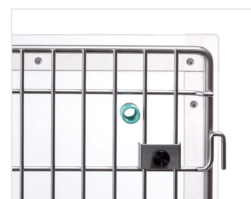



・酸素供給アダプター（メス）
・パッキン

注意事項

テルコム製酸素濃縮器をご使用の場合に限り加工を承ります。ケージのメーカー・サイズ・形状などにより、仕様及び価格が異なります。

撮影はもちろん、 ミニケージとして使える CT カプセル

- 01 筒型形状で X 線の乱反射を防ぐので撮影に最適です。
- 02 通気孔、正中線ガイドが付いています。
- 03 麻酔導入用、酸素吸入用アダプター（直径 15mm）付きです。
- 04 造影剤チューブなどを通す穴（直径 6mm）が 4 カ所あります。
- 05 テルコム製酸素濃縮器と接続することで酸素室としてご使用いただけます。

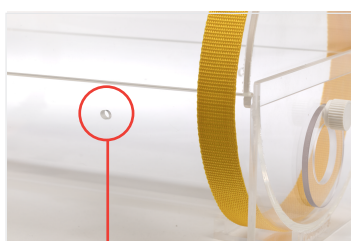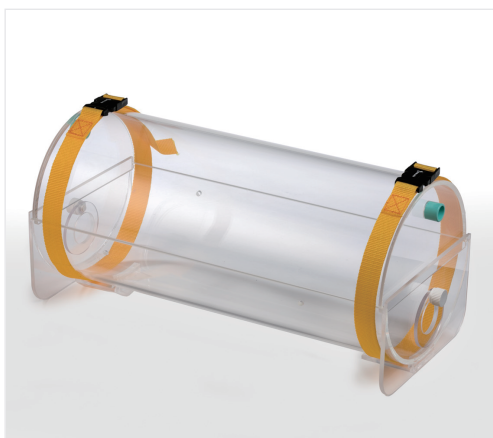

造影剤チューブなどを通す穴

小サイズ

寸法	Φ200×L450 (mm)
材質	アクリル樹脂

特注サイズ

寸法	Φ300×L600 (mm)
材質	アクリル樹脂