

じつは鳥にも使える、 テルコムの酸素濃縮器。

動物病院専用に設計された人気のスタンダードモデル

安心を
お届けする

3年保証

特許
3件取得

販売台数は
約 2,800 台！

テルコムの酸素濃縮器は、
酸素ポンペの消費量を大幅に節減できます。

安心
安全

手間
削減

コスト
削減

ポンペの交換頻度が大幅ダウン、
酸素切れのリスクも軽減します。




H-16 型

外付け流量計をつけることで
流量調整ができます。

外付け流量計を酸素濃縮器に取り付けることで、キャリアガスの酸素濃度調整が可能になります。


※流量計は 1-10L、酸素濃度は 45-90% となります。
※外付け流量計は別売りとなります。

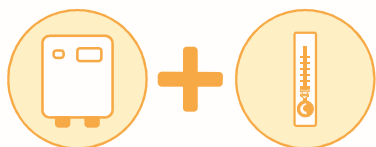

アッセンブリーホースで 2 台の
ケージに酸素を供給できます。


小さなケージであれば酸素濃縮器 1 台で、ケージ 2 台分の酸素をまかなうことができます。

※アッセンブリーホースは別売りとなります。
※供給できるケージの大きさに限りがあります。
詳しくは担当スタッフにお尋ねください。

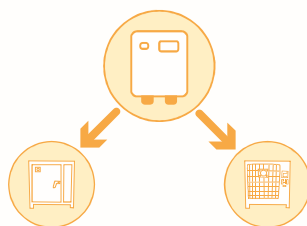


CT カプセルを
ミニケージとして使用できます。

ネブライザー、点滴チューブ、電源コード等を通すことができる穴があります。
CT カプセルの価格は、テルコム製小型ケージの約 1/3 です。

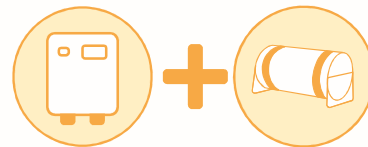

H-16 型 仕様一覧

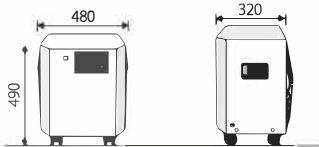外形寸法		W480×D320×H490 (mm)	
			
重量		24kg	
電源		AC100V/320W (50Hz)	AC100V/360W (60Hz)
酸素生成能力	設定値：流量	1-2L/分 (高濃度ホース使用時)	8-10L/分 (標準ホース使用時)
	設定値：濃度	80-90%	45-50%
流量計	標準	なし	
	増設オプション	あり	
付属品		①標準 (ICU 接続用) ホース ②高濃度 (マスク吸入用) ホース	
関連するオプション製品 (別売)		・アッセンブリーホース (分配用ホース) ・麻酔器接続直結ホース ・麻酔器接続専用外付け流量計 ・外付け流量計 ※1	
保証期間		3 年間	

※1 外付け流量計…酸素濃縮器に取り付けることでキャリアガスの酸素濃度の調整が可能になります。

製品ラインアップ

H-16 型

¥200,000- (税抜)

詳細は表面と、裏面 仕様一覧表参照。



Fフラッシュ -17 型

¥330,000- (税抜)

毎分 20L で酸素供給するハイパワーモデル。

コントロール部：W295×D585×H375 (mm) 17kg

コンプレッサー部：W295×D710×H515 (mm) 29kg

電源：AC100V/490W (50Hz) AC100V/660W (60Hz)



M アシスト -17 型

¥260,000- (税抜)

麻酔器への供給酸素濃度を調整できるモデル。

本体：W480×D320×H490 (mm)

ブロー流量計 + 支持ポール：500～1000 (mm) 25kg

電源：AC100V/320W (50Hz・60Hz)



酸素濃度計 TM-6000 型

¥40,000- (税抜)

手のひらサイズの軽量型 酸素濃度計

150×40×40 (mm) 約 150g※電池重量 40g 含む

測定範囲：0.00～99.9% (指示精度：値の ±2%)

電源：単 3 電池 2 本使用



ケージ

小型：¥120,000- 中型：180,000- (税抜)

ネプライザー吸入にも使用可能。

小型ケージ：W600×D400×H400 (mm) 約 8kg

中型ケージ：W800×D550×H550 (mm) 約 16kg

材質 PET 樹脂



アッセンブリーホース

¥5,000- (税抜)

酸素濃縮器から分岐部まで 3m、分岐部から

ケージまでは 3m です。



表ページで
紹介

扉加工サービス

¥25,000～ (税抜)

お使いの入院ケージを酸素室として活用できるサービスです。

- ・テルコム製酸素濃縮器をご使用の場合に限り加工を承ります。
- ・ケージのメーカー、サイズ、形状などにより仕様及び価格が異なります。




麻酔器接続専用流量計

¥85,000- (税抜)

酸素の流量計のみが付いている麻酔器、笑気「インターロック式」の麻酔器と酸素濃縮器を接続するためのホースです。

2m (標準) / T 型アダプター ホース付き

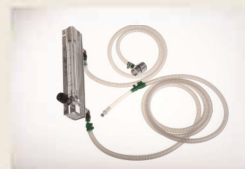

CT カプセル

小：¥42,000- 特大：80,000- (税抜)

撮影はもちろん、ミニケージとして使用可能。

小サイズ：Φ200×L450 (mm)

特注サイズ：Φ300×L600 (mm)

材質 アクリル樹脂



表ページで
紹介

麻酔器接続直結ホース

¥12,000- (税抜)

麻酔器と酸素濃縮器を接続するためのホース

です。 2m (標準) (AIR/ 笑気)



※製品の規格・寸法は予告なく変更する場合があります。